


ARKON

Datenübertragung schlägt Brücken

Erweitert die Möglichkeiten

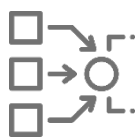

Keine Softwareadaption

Sobald die Kabel verbunden und ARKON in Strombetrieb gesetzt wurde, überträgt ARKON die MIRUS-Daten automatisch



Schnelle Datenübertragung

ARKON startet nach einfacher Anbindung an den MIRUS Controller und dem Patientenmonitor umgehend mit der Datenaufzeichnung




Live-Daten

Am Patientenmonitor werden die Daten des MIRUS stets aktualisiert angezeigt



Platzersparnis

Mit seinem kleinen schnittigen Gehäuse kann der ARKON leicht integriert und montiert werden

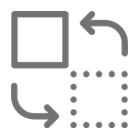

Geräteunabhängig

Ändern sich MIRUS Controller oder der Patientenmonitor, passt sich ARKON automatisch neu an



ARKON Data Bridge ist ein Produkt zur Übertragung von Datensignalen des MIRUS Controller an einen Patientenmonitor. Während des Betriebs werden Messwerte und Alarme unverschlüsselt und unverändert übertragen.

Allgemeine Spezifikationen

Physikalische Abmessungen

B x H x T 95 mm x 31 mm x 60 mm *Gewicht* 450 g

Umgebungsbedingungen (Im Betrieb)

Temperaturbereich 15 bis 35 °C *Atm. Druckbereich* 700 bis 1.100 hPa
Feuchtigkeitsbereich 30 bis 75 % relativ,
nicht kondensierend

Umgebungsbedingungen (Lagerung und Transport)

Temperaturbereich -20 bis 60 °C *Atm. Druckbereich* 500 bis 1.200 hPa
Feuchtigkeitsbereich 10 bis 95 % relativ,
nicht kondensierend

Klassifizierung

Nicht medizinisches Produkt, CE-Konformität gemäß 2014/30/EU

Elektrische Versorgung Netzteil

Versorgungsspannung 100 bis 240 V_{AC} ± 10% *Frequenz* 50 bis 60 Hz ± 5%
Leistungsaufnahme < 15 VA

Elektrische Versorgung Gerät

Nennspannung 5 V Gleichstrom *Stromstärke* Max 2.5 A

Versionen

ARKON-PH Kompatible Philips Patientenmonitore über IntelliBridge EC 10:
IntelliVue MP Serie (SW Version H.15 oder höher), IntelliVue MX Serie
(alle SW-Versionen)
Kompatible Philips Zentralen über IntelliBridge EC40/80:
PIIC iX (SW Version B.0), PIC iX (SW-Version C.0 oder höher)
Kompatible Treiber: Open Interface IB-ED101-A.6 oder höher



Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)
August-Thyssen-Str. 30, 56070 Koblenz
Deutschland

Tel.: +49 261 899 689 00

Fax.: +49 261 899 689 09

www.tim-gmbh.de

info@tim-gmbh.de



Die technischen Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

ARKON Broschüre ©2021 TIM GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Rev. E-00 von 12/21.

TIM ist eine Trademark der Firma TIM GmbH.



Besuchen Sie uns
www.tim-gmbh.de

Sales Partner: